

研磨ツールベストセクション

■艶出し研磨エンジン用ブラシ

シャモア ロビンソンブラシ

鹿皮をサンドウィッチしたブラシで
凸凹細部の研磨作業が簡単に行えま
す。



r.p.m 15,000 max HP用: 1箱 4本入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: シャモアロビンソンブラシ
届出番号: 13B3X00108001300 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■艶出し研磨エンジン用ブラシ

ギアー ロビンソンブラシ

歯車型カットによるタッピング運動
が、一層効果的な研磨を可能にし咬
合面などの細部仕上げ研磨がスピー
ディーに行えるブラシです。



r.p.m 15,000 max HP用: 1箱 6本入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: ギアーロビンソンブラシ
届出番号: 13B3X00108001302 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■歯面清掃研磨用ブラシ

ブラシコーン

ブラシ形状がカップタイプで、充填
補綴物類舌面研磨や、特に裂溝部で
の研磨に良好な形状です。
スケリング後の研磨・歯垢落とし用
RAタイプブラシです。



r.p.m 10,000 max RA用: 1箱 10本入/30本入

一般の名称: 歯科予防治療用ブラシ 販売名: ブラシコーン
届出番号: 13B3X00108001004 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■歯面清掃研磨用ブラシ

ホースブラウンポリッシングブラシ

弾力性に優れた腰の強い毛質で、口
腔内歯面研磨に適した毛丈は毛先が
開きづらいRAタイプブラシです。




r.p.m 10,000 max RA用: 1箱 10本入/30本入

一般の名称: 歯科予防治療用ブラシ 販売名: ホースブラウンポリッシングブラシ
届出番号: 13B3X00108001002 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■レーズ用研磨ブラシ

ホースブラウンレーズブラシ

レジン・メタル・インレークラウン用
3形態6タイプ茶色馬毛レーズブラシです。
ブラシのウッド形状は、研磨物にウッド
部が当たることを少なくし、また筒が食
い込み易い角度をセンター両側に付けた
ブラシです。

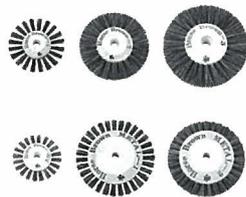

r.p.m 5,000 max レーズ用

種 類	包装単位	届出番号
レジン用	1割 5ヶ入	13B3X00108000014
	2割 5ヶ入	13B3X00108000015
	3割 5ヶ入	13B3X00108000016
IC(インレー・クラウン)用	1割 5ヶ入	13B3X00108000017
メタル用	1割 2ヶ入	13B3X00108000018
	2割 2ヶ入	13B3X00108000019

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: ホースブラウンレーズブラシ
届出番号: 13B3X00108000014~19 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■艶出し研磨用レーズバフ

フランチャーバフ

ファイバーとシャモアをサンドウィ
ッチしたレーズ用バフで、仕上げ最
終艶出し研磨用。



r.p.m 3,400 max レーズ用: 1個入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: フランチャーバフ
届出番号: 13B3X00108000502 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■艶出し研磨エンジン用ホイール

フランチャーホイール

ファイバーとシャモアをサンドウィ
ッチしたハンドピース用ホイールで
レジン・金属・床矯正装置などの最
最終艶出し研磨用。



r.p.m 15,000 max HP用: 1箱 12本入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: フランチャーホイール
届出番号: 13B3X00108000503 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■艶出し研磨エンジン用鹿皮

ソフトシャモア ホイール

メタルセンター採用により、マンド
レールとのチャッキングが容易です。
尚、縫い目ナシ加工です。



r.p.m 15,000 max RA・HP 共用 1箱 6個入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: ソフトシャモアホイール
届出番号: 13B3X00108001301 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■艶出し研磨用フェルト

ミニフェルトホイール

補綴物また歯面清掃時の研磨等が容
易に行なえるミニフェルトホイール
です。



HP・RA用: 10個入・20個入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: ミニフェルトホイール
届出番号: 13B3X00108001310 一般医療機器
製造販売元
株式会社 クロダプロダクツ

■艶出し研磨用フェルト

ミニフェルトコーン マンドレール付

ミニフェルトコーン専用のスクリューマ
ンドレールに装置する事で、口腔内歯面
艶出し及び修復充填物また補綴物の細部
最終艶出し研磨等が容易に行えます。



RA用 Aタイプフェルトコーン10個・マンドレール1本入
RA用 Bタイプフェルトコーン20個・マンドレール2本入

一般の名称: 歯科用研磨器材 販売名: ミニフェルトコーン マンドレール付
届出番号: 13B3X00027000027 一般医療機器
製造販売元
小野島製作所

■歯科用・最終艶出し研磨材

アクティブブライト

硬質レジン・床用レジン・スルフォン・金属対応の最終艶出し研磨材で、パフ・ブラシ等に付着性が良好。

NET.50g×2 色調: イエロー

一般的名称: 歯科用研磨材 販売名: アクティブブライト
届出番号: 11B3X00042000017 一般医療機器
製造販売元
下村石膏株式会社



■歯科用艶出し研磨材

アクティブブライト・メタル

歯科用金銀パラジウム・銀合金対応の研磨材で、特に光沢度・洗浄性を重視した金属専用最終研磨材です。

NET.50g×2 色調: サーモンピンク

一般的名称: 歯科用研磨材 販売名: アクティブブライト・メタル
届出番号: 11B3X00042000018 一般医療機器
製造販売元
下村石膏株式会社




■歯科用・固形研磨砂【超微細粒子】

ケミブロック

硬質レジン・床用レジン・スルフォン・金属対応の強力軟質固形研磨砂。チェアサイドでも容易に砂研磨が可能です。

NET.40g×4 色調: グレー

一般的名称: 歯科用研磨材 販売名: ケミブロック
届出番号: 11B3X00042000016 一般医療機器
製造販売元
下村石膏株式会社

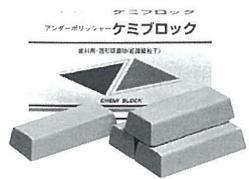

■歯科用・研磨砂【超微細粒子】

NSKケミサンド

仕上げ用レジン研磨砂で研磨面が滑沢に仕上がります。スルフォン義歯・硬質レジンの研磨に効果的です。

2kg入

一般的名称: 歯科用研磨材 販売名: NSKケミサンド
届出番号: 11B3X00042000015 一般医療機器
製造販売元
下村石膏株式会社



■歯科用研磨ポイント

スーパーカラーポイント

咬合面小窩裂溝・隣接面辺縁部・レジン床歯間乳頭部など他細部形態修正及び仕上げ研磨用です。

G4・グレーカラー【超微細】 HP・RA用: G4/R7/Y15 3本入・6本入
R7・レッドカラー【微細】
Y15・イエローカラー【細】

一般的名称: 歯科用研磨材 販売名: スーパーカラーポイント
届出番号: 11B3X00042000021 一般医療機器
製造販売元
下村石膏株式会社



■ポーセレン用研磨材

スーパースター

チェアサイドでポーセレン・ハイブリットレジン・ジルコニアなどにより修復された補綴物咬合調整後の艶出し研磨が、グレージングに近い光沢を再現。

7g入

一般的名称: 歯科用研磨材 販売名: スーパースター
届出番号: 11B3X00042000019 一般医療機器
製造販売元
下村石膏株式会社



技工関連品

■ろう着用ブロック

ライトブロック

新素材の使用によりアスベスト公害問題を一挙に解決した、耐火放熱効果が高い多孔質のろう着作業用六面体ノンアスベストブロックです。金属溶解時には凹面にルツボ皿を置き、平坦面はリング徐冷に利用できます。

販売元 株式会社 日本歯科工業社 1個入



■技工用パテ

モデルブロック

モデルブロックは長期間常温でパテ状を保つシリコン。ワックスの代用として作業が簡便で経済的です。

- 用途
- ・アンダーカットのブロックアウト
- ・各型トレーのリリーフとスペーサー
- ・各種歯間封鎖

114g入

一般的名称: 歯科用セラミティーワックス 販売名: モデルブロック
届出番号: 27B1X00042000524 一般医療機器
製造販売元
タカラベルモント株式会社



※使用上の注意等は添付文書を参照してください。

尚、お求めに応じて、医療機器添付文書をお送り致します。

※仕様及び価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売代理店

株式会社 日本歯科工業社
発売元
〒110-8530 東京都台東区上野5-12-8
TEL. 03 (3836) 2191 FAX. 03 (3836) 2199
お問い合わせは 商品開発室までご連絡下さい
TEL (03) 3836-2196 FAX (03) 3831-7054
http://www.kk-nikkosha.com