デジタル位相差顕微鏡
SK-7LED

『驚き』が『予防』に変わる、
『見える化』する位相差顕微鏡。



※診療イメージ



スライドガラス挿入側




医院価格 **¥395,000**（税別）

※パソコンは含みません。



21.5インチモニター使用時に2750倍200万画素

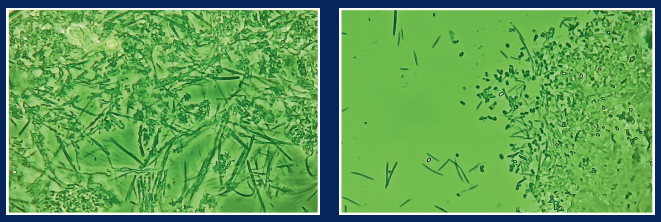

※口腔内細菌の観察イメージ

位相差顕微鏡を選ぶ理由は？

患者様とのコミュニケーションツール
としてご活用いただけます。

1.【リスクの視覚的な共有】
う蝕・歯周病のリスクに関わる口腔内細菌をビジュアルで共有しながら解説。

2.【驚きから意識変革へ】
視覚的な強いインパクトがもたらす口腔ケアへの当事者意識のアップ。

3.【予防行動への動機付け】
日々のブラッシング指導や定期健診の重要性をご理解頂くことでデンタルIQも向上へ。

1.高画質デジタル200万画素
高解像度カメラ（USB2.0UVC）を搭載。
一目で見やすいグリーンバックの画面。立体感と明暗のあるコントラスト画像で口腔内細菌をリアルタイム観察。

2.パソコンとUSB接続
Windows PCとUSB接続して専用ソフトを起動するだけの簡単接続。

3.コンパクトで簡単操作
ツマミレバーによりスライドガラスの位置調整やピント合わせの操作性が良く、使用後のお手入れも簡単。コンパクトで移動も置場も困らない。

4.達人プラス等と連携可能
パソコンに取込んだ画像を患者管理ソフト「達人プラス」へインポートして閲覧可能。
（※他社患者管理ソフトと連携可能なものもあります。）

達人プラス TATSUJIN PLUS
NARCOHM ナルコーム





※保管イメージ

本体サイズ:幅120㎜×奥行220㎜×高さ175㎜
重量:2.6㎏

PCで口腔内細菌をリアルタイム観察

患者様への視覚的な説明ツールとして最適

コンパクトで置場に困らないスッキリボディ

USB接続で簡単操作・専用ビューアソフト付き


※Windows PC専用。日本歯科工業社ホームページよりダウンロードも可能。



ご使用方法

位相差顕微鏡SK-7LED操作手順はこちら
のQRコードから動画でご参照できます。

※ｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽとｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽの圧接時は余計な水分を良く拭き取ってご使用ください。ﾚﾝｽﾞが汚れて映像が不鮮明になります。

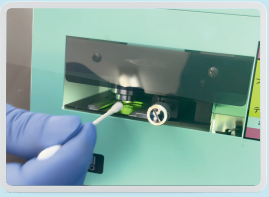

メンテナンス方法

アルコールを湿らせた綿棒でレンズの汚れをしっかり拭き取ります。汚れたまま放置すると映像が不鮮明になり、分解清掃修理が必要になるので気をつけてください。

【製品仕様】〈本体〉対物レンズ:BFプランアクロマート Ph40倍／モニター画面倍率:21.5インチモニターの場合約2750倍／照明:DC12V、LED(5W) AC100V～240V 50/60Hz／ステージ:移動範囲20㎜
〈CMOSカメラ〉撮像素子:1/2.7インチ200万画素30fps／有効画素数:1920（H）×1080（V）／画素サイズ:3.0（H）×3.0（V）um／ホワイトバランス:オート（ON/OFF切り替え可能）
露出:オート（ON/OFF切り替え可能）／電源:DC5V、約2W（USBポートより給電）／動作温度:-20°～+50°／動作湿度:20%～80%(但し結露なきこと)
【本体製品】 SK-7LED／ACアダプター(12V1A)／／USB2.0ケーブル／USBメモリー SK-7LED用ビューアソフト(DLLドライバーソフト付)
【付属品】 スライドガラス25枚／カバーガラス200枚／歯間ようじ1箱80本入

お口の環境を整えるための、一歩進んだ菌活習慣のご提案。



現状を知ることで口腔ケアへの意識改革を促します。



仁酸菌がお口にとどまり悪玉菌を抑制し、善玉菌が増えることでお口を良好に保ちます。

仁酸菌(HJ1乳酸菌)の3大特長

- **死菌(加熱処理)の圧倒的優位性**
  生菌と異なり、胃酸の影響を受けずにしっかりと口腔内、腸まで届いて免疫細胞に働きかけます。
- **吸収率が高く圧倒的菌数**
  菌体サイズが小さく結合しにくいため、1回で数千億単位の圧倒的な菌数を補給可能です。
- **乳酸中和なしの頑強な培養**
  仁酸菌は中和培養をせずに時間をかけて培養するので、強い菌のみで製品化されています。

仁酸菌シリーズ

歯科医院専売 乳酸菌サプリメント

㈱H＆J お取り扱い製品です。

【患者様の口腔状態やライフスタイルで選べるラインナップ】





チュアブル
【28粒入／124粒入】





スティック
【7包入／37包入】





ペースト
【7包入】

※仁酸菌シリーズのご案内はこちらからご覧ください。

販売元 株式会社日本歯科工業社
〒110-8530 東京都台東区上野5-12-8
TEL:03-3836-2191 FAX:03-3836-2199

発売元 有限会社商道企画
〒178-0064 東京都練馬区南大泉3-3-10
TEL:03-3921-4618 FAX:03-3921-4619

製造元 メイジテクノ株式会社
〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1
TEL:049-259-0111 FAX:049-259-0113

2026.11

取扱店